

4DMesh®

Siatka przepuklinowa kompozytowa, częściowo wchłanialna. Siatka do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i udowych z dostępu zewnątrzotrzewnowego.

CECHY KLUCZOWE

Siatka składa się w 25% z włókien polipropylenowych (PP) oraz w 75% z wchłanialnych włókien kwasu poli-L-mlekowego (PLLA). Siatka posiada znacznik ułatwiający implantację.

Gramatura siatki przed implantacją wynosi 120g/m². Gramatura siatki po absorpcji składnika wchłanialnego 30g/m². Grubość siatki 0,8mm. Wielkość porów 1,95x4,45mm. Wytrzymałość na rozciąganie 36N/m.

Siatka dostępna w wersji pre-cut - wstępnie przycięta z otworem na powrózek nasienny, w wersji pre-cut do zabiegów laparoskopowych oraz w wersji anatomicznej.



Otrzewna
Przepuklina pachwinowa skośna
Przepuklina pachwinowa prosta
Przepuklina udowa




	Nr katalogowy	Rozmiar (cm)	
LICHTENSTEIN			
	FBIO SR F128	12 x 8	
	4DMESH M613	6 x 13,5	
Pre-cut		4DMESH F812	8,5 x 12,5
		4DMESH MBES	5 x 12
		4DMESH MBEL	7 x 13
	TAPP/TEP		
	4DMESH RABA	11 x 14	
Pre-cut		4DMESH 1215	12 x 15
		4DMESH 1317	13 x 17
		4DMESH 1216	12 x 16,5
		4DMESH 1717	17 x 17
Anatomiczne		4DMESH PRSR	prawa 10,5 x 14
		4DMESH PRSL	lewa 10,5 x 14
		4DMESH PRLR	prawa 12 x 15
		4DMESH PRLl	lewa 12 x 15
		4DMESH PRXR	prawa 12 x 17
		4DMESH PRXL	lewa 12 x 17

> MATERIAŁ

Siatka:

- 75% PLLA (Kwas poli-L-mlekowy) - wchłanialny
- 25% polipropylen - niewchłanialny

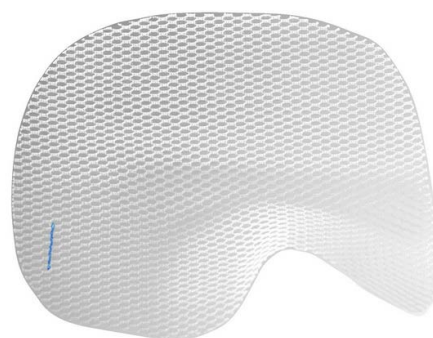

UNIPROMED
sp. z o.o.

Kontakt:

tel: 881 936 109
tel: 693 451 015
ul. Wyrzyska 28/1
02-455 Warszawa

www.unipromed.pl
pawel.matraszek@unipromed.pl
elzbieta.wegrzyn@unipromed.pl

CE
0120

